

Elcam Stopcocks

Marvelous™ (MRVLS) 三通阀

这款可擦拭封闭式三通阀具有独特的流道设计, 专门用于静脉输液和压力监测应用, 可确保最低的残余死腔量。

Marvelous™ 可帮助用户自动冲洗药液和血液残留物, 无需使系统暴露于外部空气中, 而且只需极少的人工操作, 在设计上最大程度体现最佳实践原则。


爱康的 Marvelous™ 是我们的 E-Safe™ 系列产品之一, 旨在为我们的客户提供可最大程度减少三通阀污染、提高患者安全性的系列解决方案。



爱康医疗的 Marvelous™ 三通阀 -
病人监护与静脉输液的极佳选择



病人监护产品

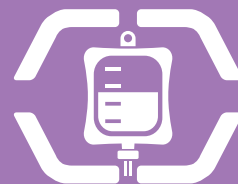

静脉输液及
麻醉

 Elcam Devices  Elcam Stopcocks  Elcam Accessories

Marvelous™ 在静脉注射 (IV) 及压力监测等方面拥有诸多优势:

安全性

- **减少细菌和空气进入** - 系统始终保持封闭状态.
- **减少死腔** - 确保冲洗时残留量极少. 无论药液还是血液, 都可以通过对阀体内部空间的持续冲洗将残留量降到最低, 以防止凝血和细菌定植, 为患者提供更好的保护.

高效的压力监测

- 在封闭式系统中进行预冲洗.
- 确保压力监测过程中, 出现对信号动态响应的影响.

便利的采血方式

- 利用封闭式系统和直连式冲洗的优势, 采血更加方便, 残留量极少.



易于使用

- **节省您客户的时间和费用** - 即擦即用! 无需使用插管、针头和盖帽.
- **缩短冲洗时间** - 无需冲洗侧接头.
- **通用性好** - M-Safe 的接头兼容所有常用鲁尔接头.

属性	单位	用于监测应用 ¹ 的 Marvelous (标准流量)	用于IV (静脉注射) 应用 ¹ 的 Marvelous (高流量)
“全开”下的流量 ²	[ml/分]	140±5	200±5
侧接头闭合情况下的流量 ²	[ml/分]	70±5	105±5
从侧接头到鲁尔公接头的流量 ²	[ml/分]	135±5	175±5
侧接头容量	[ml]	0.2±0.02	0.2±0.02

¹ 有关可接受的质量水平, 请参阅规格 0022-G

² 流量在75 mm Hg压力/1米水压下测得

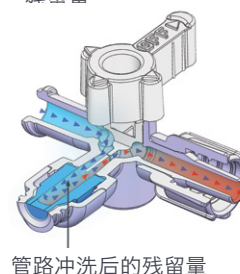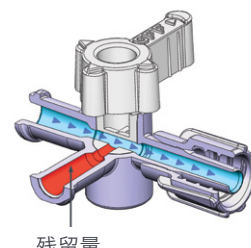

物理属性

- 耐油脂性
- 不含乳胶
- 无溶血性

配置选项

- 1个阀或2个阀
- 手柄: 单臂或三臂
- 不同手柄颜色
- 高流量或标准流量
- 带或不带鲁尔接头
- 多联板

神奇三通 (Marvelous™)
获得CE证书 (非消毒包装产品) 以及510 (K) 认证。



www.elcam-medical.com

Head Office/Manufacturer
Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120/1
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA
Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe
Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China
Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com